

Прочитайте перед применением ингалятора

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНГАЛЯТОРА

АЙРСУПРА

(будесонид + сальбутамол)

Аэрозоль для ингаляций дозированных

Для ингаляций через рот

Внимательно прочитайте данную инструкцию

Ваш ингалятор препарата АЙРСУПРА (в данной инструкции называется «ингалятором») может отличаться от ингаляторов, которые Вы применяли ранее.

Важная информация

- Ингалятор предназначен для ингаляций через рот.
- Подготовьте ингалятор к первому использованию.
- Подготовка ингалятора к первому использованию необходима, чтобы при последующем применении Вы получали назначенную Вам дозу препарата.
- Промывайте распыляющее устройство белого цвета 1 раз в неделю.

Хранение ингалятора

- Храните ингалятор при температуре не выше 30 °С.
- **Не храните ингалятор во влажном помещении, например, в ванной комнате.**
- Храните ингалятор и все лекарственные препараты в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть их.

Части Вашего ингалятора



Считывание показаний индикатора доз


Индикатор доз производит обратный отсчет по 1 дозе после каждого высвобождения препарата

Указатель

Указывает на количество оставшихся доз

Желтая зона

Обратитесь за новым ингалятором, когда указатель находится в желтой зоне

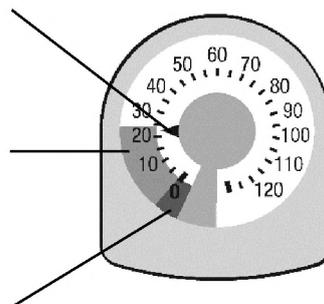

Красная зона

Утилизируйте ингалятор, когда указатель находится на значении «0» в красной зоне

Не пытайтесь провести ингаляцию, когда указатель находится на значении «0», потому что Вы не получите полную дозу препарата.

Потребность в новом ингаляторе

- Обратитесь за новым ингалятором, когда указатель на индикаторе доз находится в желтой зоне.

Утилизация ингалятора

Утилизируйте ингалятор в соответствии с локальными требованиями (в зависимости от того, что из перечисленного наступит раньше):

- если прошло **12 месяцев** после извлечения ингалятора из пакета из алюминиевой фольги
или
- после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке, пакете и баллоне
или
- если указатель на индикаторе доз находится на значении «0».

Не используйте распыляющее устройство повторно и не используйте его с баллонами с лекарственным препаратом от других ингаляторов.

Не прокалывайте баллон и не сжигайте его.


ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Подготовьте Ваш ингалятор к первому использованию

- На этикетке распыляющего устройства запишите дату, до которой можно использовать препарат.
- Перед **первым использованием ингалятора встряхните его и сделайте распыление. Повторите оба действия 4 раза** для подготовки к использованию.

1. Запишите дату

На этикетке распыляющего устройства запишите дату, до которой можно использовать ингалятор (12 месяцев после первого вскрытия пакета из алюминиевой фольги).

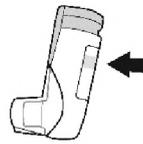


Запишите дату на этикетке распыляющего устройства



2. Подготовьте ингалятор к первому использованию

Снимите колпачок с мундштука.

Хорошо встряхните ингалятор и высвободите **4 тестовые дозы**, направив ингалятор в сторону от себя. Перед каждым высвобождением дозы встряхивайте ингалятор.

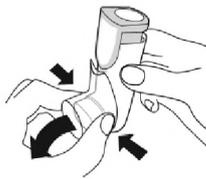

Встряхните ингалятор и высвободите тестовую дозу. Повторите оба действия 4 раза.

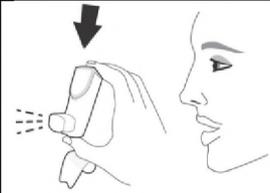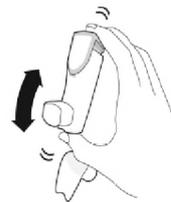

Для подготовки ингалятора предусмотрены дополнительные дозы. **Не пропускайте подготовку ингалятора к первому использованию.**


Когда и как проводить повторную подготовку ингалятора к использованию

Когда проводить повторную подготовку ингалятора к использованию:

- после промывки распыляющего устройства
- если ингалятор уронили
- если ингалятор не использовали более 7 дней.

Как проводить повторную подготовку ингалятора к использованию:

Для повторной подготовки ингалятора к использованию снимите колпачок и высвободите **2 тестовые дозы**, перед каждым высвобождением дозы встряхивая ингалятор.

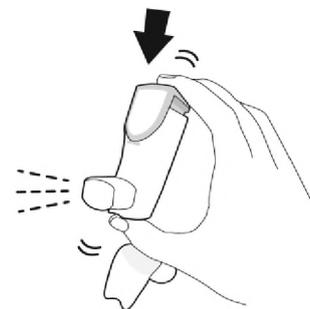

Встряхните ингалятор и высвободите тестовую дозу. Повторите оба действия 2 раза.

Для подготовки ингалятора предусмотрены дополнительные дозы. **Не пропускайте подготовку ингалятора.**


ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА

Как проводить ингаляции препарата

- Проводите **по 2 ингаляции «по потребности»**. Не следует применять более **12 ингаляций в течение суток**.
- По возможности, после применения прополощите рот водой, чтобы предотвратить развитие грибковой инфекции полости рта.



1. Проверьте ингалятор



Снимите защитный колпачок с мундштука. Проверьте мундштук на наличие посторонних частиц и удалите их перед использованием ингалятора.

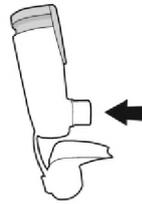

Проверьте мундштук внутри

2. Встряхните ингалятор и проведите ингаляцию
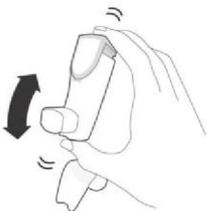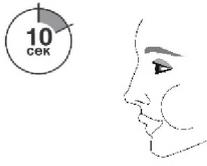
<p>Хорошо встряхните ингалятор перед каждым высвобождением дозы.</p> 	<p>Сделайте полный выдох.</p> 	<p>Поместите мундштук в рот и обхватите его губами.</p> 	<p>Начните глубокий и медленный вдох, одновременно высвобождая 1 дозу. Продолжайте вдох так долго, насколько сможете.</p> 	<p>Задержите дыхание как можно дольше, приблизительно на 10 секунд.</p> 
--	---	---	--	---

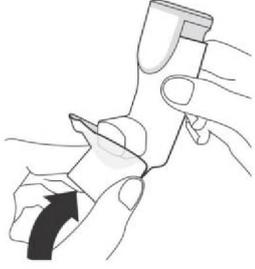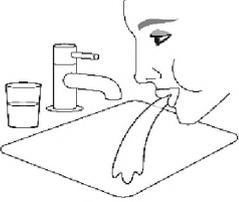3. Повторите	4. Наденьте колпачок на мундштук	5. Прополощите рот
 <p>Повторите пункт 2, чтобы провести вторую ингаляцию</p>	<p>Наденьте защитный колпачок на мундштук.</p> 	<p>Прополощите рот водой. После полоскания выплюньте воду, не глотайте.</p> 


ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОМЫВКА

Промывайте распыляющее устройство 1 раз в неделю


- Промывайте распыляющее устройство 1 раз в неделю, чтобы частицы препарата не накапливались и не мешали высвобождению препарата из мундштука.
- **Не допускайте намокания баллона.**
- Повторно подготовьте ингалятор к использованию после промывки распыляющего устройства.

1. Извлеките баллон

Извлеките баллон и отложите его в сторону.


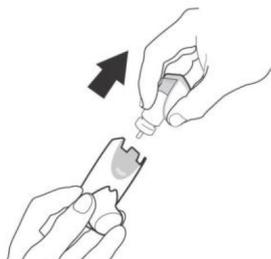


Снимите защитный колпачок с мундштука.

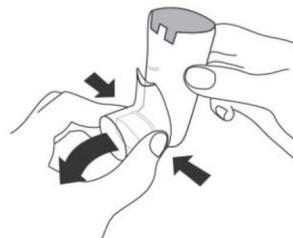

2. Промойте распыляющее устройство с двух сторон

Промойте распыляющее устройство под струей теплой воды через мундштук в течение 30 секунд, а затем – через верхнюю часть распыляющего устройства в течение 30 секунд. **Не используйте мыло.**

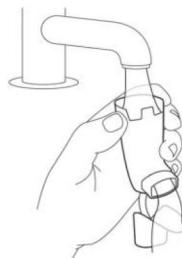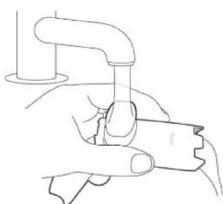



**Промывайте в общей сложности
в течение 60 секунд**

Максимально стряхните воду с распыляющего устройства.



**Не вытирайте
полотенцем или
салфеткой**


Осмотрите распыляющее устройство и мундштук внутри, чтобы убедиться, что частицы препарата полностью удалены. При наличии скопившихся частиц повторите действия, указанные в пункте 2.

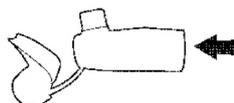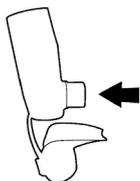

**Осмотрите распыляющее
устройство и мундштук внутри**

3. Высушите распыляющее устройство на воздухе

Оставьте распыляющее устройство на воздухе для высыхания, желательно на всю ночь.

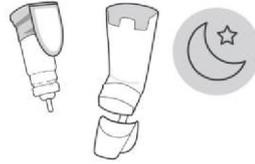



4. Соберите ингалятор и повторно проведите его подготовку к использованию

Сначала наденьте защитный колпачок на мундштук, а затем, осторожно надавливая на баллон, вставьте его в распыляющее устройство.

Не помещайте баллон в распыляющее устройство, пока вода на нем не высохла.

Не вставляйте баллон в распыляющее устройство, если защитный колпачок не надет на мундштук.

Повторно подготовьте ингалятор к использованию, высвободив **2 тестовые дозы**, перед каждым высвобождением дозы встряхивая ингалятор.

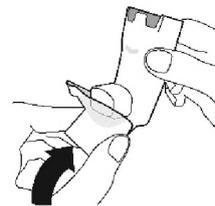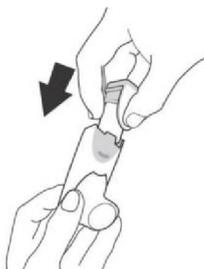

При необходимости экстренного применения ингалятора до его полного высыхания.

- стряхните воду с распыляющего устройства
- вставьте баллон в распыляющее устройство
- встряхните ингалятор и высвободите 2 тестовые дозы, направив ингалятор в сторону от себя; перед каждым высвобождением дозы встряхивайте ингалятор
- проведите ингаляцию назначенной Вам дозы препарата
- снова промойте ингалятор – повторите описанные выше действия, начиная с пункта 2.